




Placa de baza pentru Curing Pen - Sifary

Pret:

540,00 lei TVA inclusa

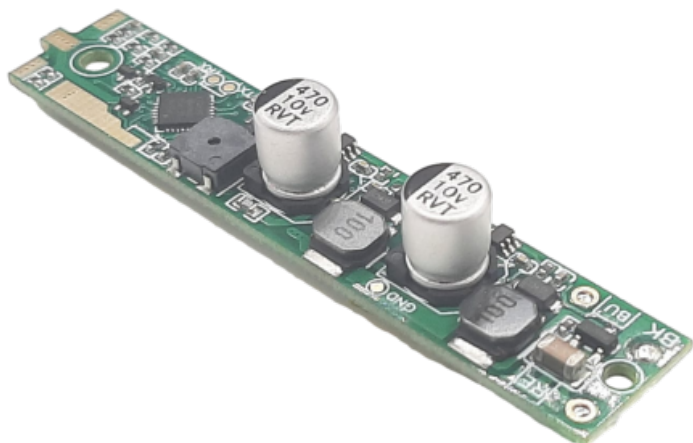

Descriere produs:

Placa de bază pentru Curing Pen este proiectată special pentru a permite dispozitivului să genereze lumină de înaltă intensitate, necesară pentru întărirea rapidă a materialelor dentare. Include componente electronice de înaltă performanță care asigură transmiterea eficientă a energiei către LED-urile de mare putere și alte componente ale dispozitivului.

Componente principale:

1. **Display LCD** - pentru afișarea informațiilor de funcționare și stării bateriei.
2. **Buton de control** - un comutator utilizat pentru activarea sau dezactivarea dispozitivului, precum și pentru schimbarea setărilor.
3. **Capacitori de 10V (2x470 μ F)** - folosiți pentru stabilizarea tensiunii și reducerea fluctuațiilor.
4. **Cip IC** - pentru controlul semnalelor electrice și gestionarea funcționării LED-urilor.
5. **Conectori de alimentare și semnal** - pentru conectarea la sursa de alimentare și la LED-uri.
6. **LED-uri de înaltă putere** - responsabile pentru emiterea luminii utilizate în procesul de întărire.

Caracteristici tehnice:

- **Tensiune de operare:** 5V - 12V
- **Tip display:** LCD monocrom pentru afișarea informațiilor esențiale



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Capacitori:** 470 μ F, 10V x 2 bucăți pentru stabilitatea tensiunii
- **Dimensiuni:** aproximativ 10 cm lungime și 2 cm lățime
- **Material PCB:** Placă de circuit imprimat din fibră de sticlă (FR4)
- **Compatibilitate:** Special concepută pentru Curing Pen din gama Sifary

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Deconectare:** Asigurați-vă că dispozitivul este complet deconectat de la orice sursă de curent înainte de înlocuirea plăcii.
2. **Demontare:** Scoateți cu grijă placa de bază veche, având grijă să nu deteriorați conectorii sau alte părți fragile ale dispozitivului.
3. **Instalare:** Conectați placa de bază nouă, având grijă ca toate conexiunile să fie realizate corect și ferm.
4. **Testare:** După instalare, testați dispozitivul pentru a vă asigura că funcționează corect, monitorizând afișajul și funcționarea butonului de control.

Notă:

Această placă de bază este o piesă de schimb specializată și ar trebui instalată doar de un tehnician calificat. Este important să verificați compatibilitatea plăcii cu modelul Curing Pen înainte de instalare. O instalare incorectă poate duce la funcționare defectuoasă sau deteriorarea dispozitivului.