




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Lentila de Protectie Stanga pentru Lampa - Sifary

Pret:

51,00 lei TVA inclusa

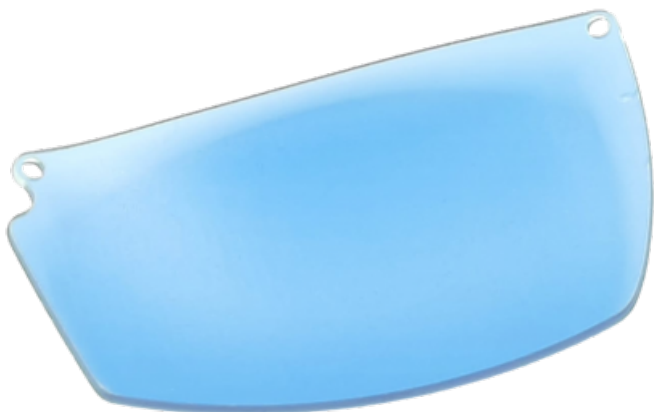

Descriere produs:

Lentila de protecție stângă pentru lampă Sifary este fabricată dintr-un material de înaltă calitate, rezistent la impact și radiații UV, special concepută pentru a oferi protecție maximă în timpul utilizării lămpilor cu lumină puternică. Aceasta se fixează ușor pe cadrul lămpii și protejează ochii utilizatorului împotriva strălucirii și radiațiilor dăunătoare.

Caracteristici tehnice:

1. **Material:** Policarbonat de înaltă calitate, rezistent la impact.
2. **Protecție UV:** Blocarea eficientă a radiațiilor UV și a luminii albastre dăunătoare.
3. **Culoare:** Albastru deschis, optimizat pentru reducerea reflexiilor.
4. **Dimensiuni:** Proiectată pentru a se potrivi perfect cu lămpile Sifary.
5. **Fixare ușoară:** Prevăzută cu găuri de fixare pentru montare sigură.

Utilizare:

- Protejează ochii operatorilor și pacienților de radiațiile dăunătoare în timpul utilizării lămpilor de întărire sau fotopolimerizare.
- Ideală pentru utilizarea în stomatologie, laboratoare sau alte domenii profesionale unde se utilizează lămpi UV.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Instalare:** Poziționați lentila în partea stângă a lămpii și fixați-o cu ajutorul șuruburilor sau clemelor furnizate (în funcție de model).
2. **Curățare:** Utilizați o lavetă din microfibră pentru a curăța lentila, evitând substanțele chimice abrazive care pot deteriora suprafața.
3. **Depozitare:** Când nu este utilizată, păstrați lentila într-un loc sigur, ferit de zgârieturi sau daune mecanice.

Notă:

Această lentilă de protecție este compatibilă doar cu lămpile din gama Sifary. Verificați specificațiile produsului înainte de achiziționare pentru a vă asigura că se potrivește cu modelul de lampă deținut.