




Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Admira Fusion 5 Set

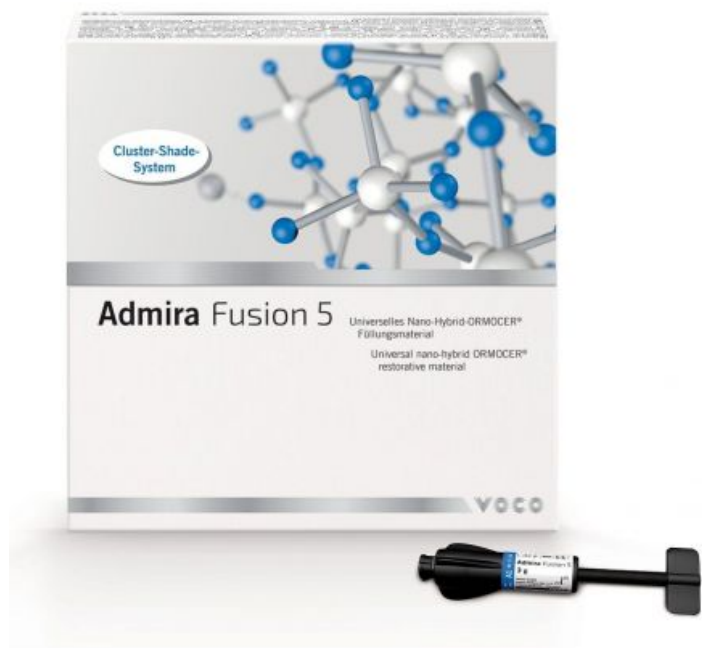

**Pret:**

**1.520,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

### **Indicatii**

Restaurari cavitati clasa I - V;

Baza in cavitatile clasa I si II;

Reconstructia dintilor anteriori traumatizati;

Fatetari dinti decolorati;

Corectarea formei si nuantei pentru o estetica imbunatatita;

Fixarea dintilor anteriori;

Repararea fatetelor, defectelor minore de smalt si a materialelor provizorii C&B;

Sigilarea fisurilor extinse;

Restaurari dinti primari;



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Reconstructie de bonturi;

Inlay compozit;

### **Avantaje/Beneficii**

- Radioopac;
- Contine 83% particule anorganice si se utilizeaza cu un sistem amelo-dentinar;
- Sistemul simplificat de culori Admira Fusion 5 cu cele cinci grupe de nuante (Cluster-Shades) acopera toate cele 16 culori clasice VITA;
- Datorita sistemului simplificat de culori, nu necesita stratificare multipla;
- Reduce semnificativ inventarul de cabinet;
- Noua matrice pe baza de rasina permite un efect cameleonic imbunatatit prin dispersia optimizata a luminii;
- Universal - indeplineste cele mai inalte cerinte atat in regiunea anterioara, cat si in cea posterioara;
- Utilizare usoara si rapida - fotopolimerizarea in numai 10 secunde pentru toate nuantele;
- Datorita consistentei nelipicioase, materialul se adapteaza foarte bine pe peretii cavitatii si poate fi modelat usor;
- Lustruirea usoara si rapida combinata cu proprietatile mecanice excelente fac din Admira Fusion 5 alegerea ideala pentru restaurarile estetice pe termen lung in regiunea anterioara si posterioara;
- Poate fi combinat optim cu toate produsele din gama Admira Fusion - daca se doreste o acoperire opaca, se pot utiliza Admira Fusion sau Admira Fusion Flow; pentru bazare cu un fluid, Admira Fusion Flow este alegerea corecta;
- Sculptabilitate excelenta;
- Nu se lipeste de instrument;
- Compatibil cu toti adezivii conventionali;
- Tehnologie ORMOCER imbunatatita - material de umplutura pe baza pur ceramica, atat particulele de umplutura cat si matricea de rasina fiind bazate exclusiv pe oxid de silicon;
- Biocompatibilitate excelenta;
- Nu contine monomeri clasici - fara Bis-GMA (BPA), TEGDMA, UDMA, etc;
- Stabilitate superioara;
- Cea mai scazuta comprimarea la fotopolimerizare (1.25% din volum);
- Cel mai redus nivel de stress la comprimare, in comparatie cu alte compozite pentru restaurare conventionale;

### **Timpi de fotopolimerizare LED/halogen (in functie de puterea lampii)**

Putere  $\geq 800\text{mW/cm}^2$ : 10s

Putere 500 - 800mW/cm<sup>2</sup>: 20s

### **Compozitie**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Sticla borosilicata bariu aluminiu, rasina ORMOCER, dioxid de siliciu, initiatori, stabilizatori, pigmenti colorati.

Correspondenta culorilor in cheia Vita

### **Prezentare**

Set 5 seringi x 3g:

1 x seringa A1 + 1 x seringa A2 + 1 x seringa A3 + 1 x seringa A3.5 + 1 x seringa A4